


# 1002 靜脈注射訓練塊

適合訓練靜脈注射、留置針注射、藥物注射、血液採集

- 極擬真的入針回饋感
- 可耐受100次以上的穿刺
- 易拆卸及可替換式的皮膚塊
- 三種血管徑以提供不同的訓練難易度

## 內容物

- ① 支架 x1 ② 配件 x1 ③ 1632皮膚塊 (內徑: 1.6mm, 外徑: 3.2mm) x1  
④ 2040皮膚塊 (內徑: 2.0mm, 外徑: 4.0mm) x1 ⑤ 3050皮膚塊 (內徑: 3.0mm, 外徑: 5.0mm) x1

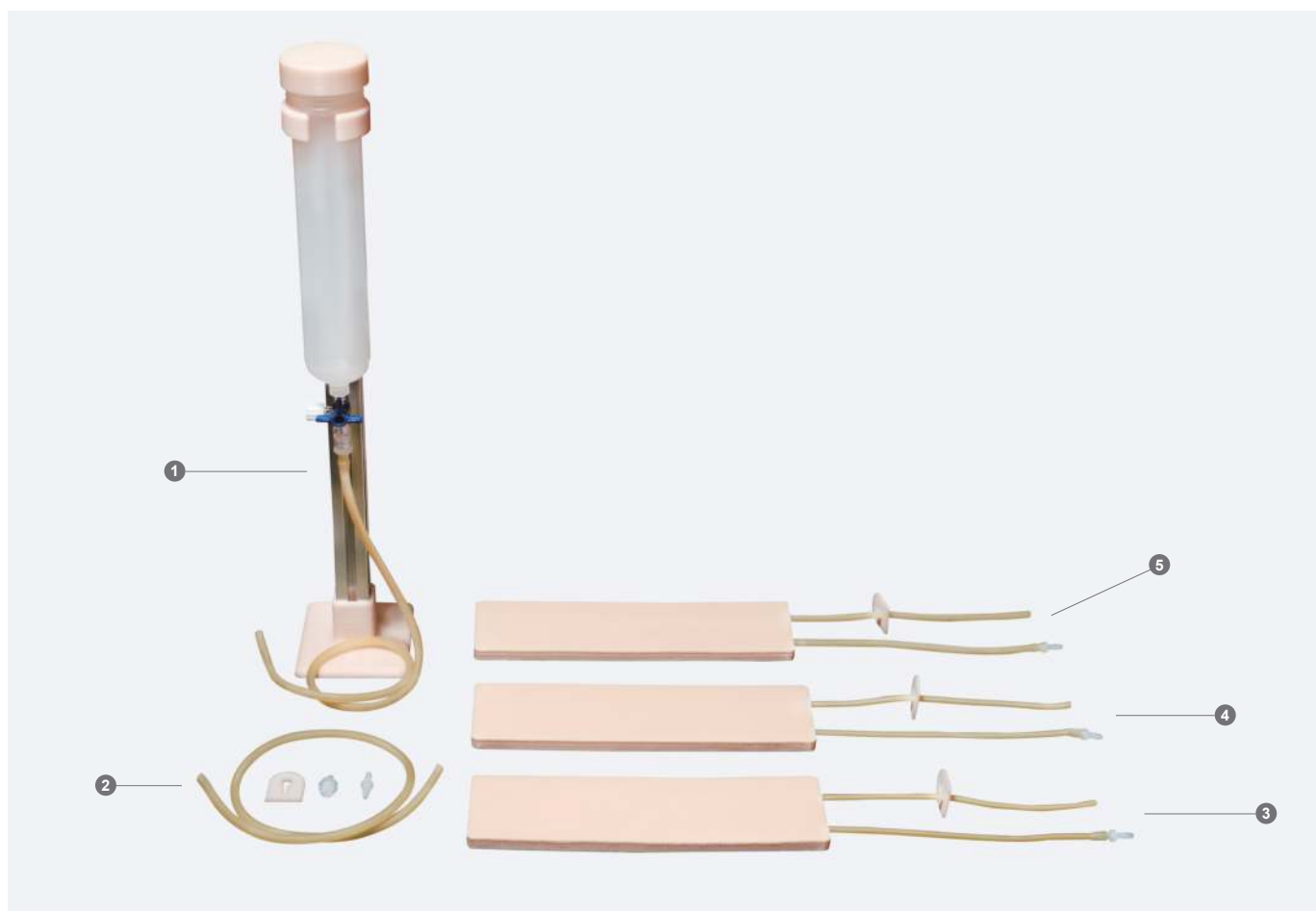

## 產品規格

	尺寸 (mm)	重量 (克)	材料
皮膚塊	200 x 58 x 8	59	硅膠

## 使用說明

### ◎ 操作影片：

<http://t.cn/R84u61g?m=4201842654980997&u=6473970887>



## 儲藏注意事項

- 把支架和皮膚塊血管中的液體排乾淨
- 把支架和皮膚塊拆開
- 用毛巾或拭紙把產品表面擦乾

## 注意事項

- 建議使用號數20~23之針頭以延長皮膚塊壽命
- 建議于皮膚塊塗上碘酒部位一個小時內用水將塗抹碘酒部位擦拭乾淨
- 請勿使用強酸、強鹼、酒精清洗皮膚塊
- 生理食鹽水中的鹽分可能會沉積在血管壁縮短血管使用壽命